

M5 抗 RFP 标签兔多克隆抗体

Product	Unit	Cat.#
M5 抗 RFP 标签兔多克隆抗体	20ul	MF572-T
M5 抗 RFP 标签兔多克隆抗体	100ul	MF572-01

【Storage】 : Shipped at -20°C. Store at -20°C.

【产品介绍】 : 该抗体为高纯度的兔多克隆抗体, 与 RFP 结构域具有高亲和性, 可灵敏特异地检测各种 RFP 编码载体表达的 RFP-Tag 融合蛋白。

【免疫原】 : 全长红色荧光融合蛋白

【缓冲液】 : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

【稳定剂】 : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

【防腐剂】 : 0.05%叠氮钠

【抗体浓度】 : 1mg/ml

【应用范围】 : Western Blot 1: 1000;


Immunoprecipitation 1: 1000;

ELISA 1: 200,000.

【注意事项】 :

1. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗;
2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。

【实验图例】 :

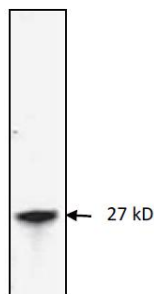

抗 RFP 标签兔多克隆抗体检测融合表达 RFP-Tag 蛋白 (27kD) 全菌裂解液 Western Blot 结果。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"